



La próxima generación de
diagnóstico neuromuscular



ventas@medikalmuneris.com
www.medikalmuneris.com

natus®

Ultrasimple. Ultra seguro.

Cuando se trata de pruebas EMG, NCS y EP, la mejor herramienta es aquella en la que usted sabe que puede confiar. Aprovechando el éxito de VikingQuest y los modelos UltraPro anteriores, Natus se enorgullece de presentar la próxima generación UltraPro S100. Desarrollado en estrecha colaboración con médicos y tecnólogos, la interfaz familiar y fácil de usar del UltraPro y la calidad de señal superior ayudan a evaluar a los pacientes con un mayor nivel de certeza.

Mejore el rendimiento con UltraPro:

- Configuración sencilla para empezar a realizar estudios más rápido
- Flujos de trabajo familiares y personalizables e interfaz fácil de usar
- Calidad de señal superior para EMG de alta definición
- Selección automática de valores de referencia AANEM.
- Capacidades de prueba añadidas y mejoradas.

La forma familiar de llegar a un diagnóstico informado

Flujo de trabajo más rápido y simplificado desde el paciente hasta el informe

Diseñado pensando en el usuario, las mejoras de hardware y software de UltraPro facilitan que los médicos y tecnólogos obtengan mejores datos al realizar pruebas de trastornos musculares y nerviosos, y brindan a los pacientes mejores respuestas.

Cómodo para proveedores y pacientes.

- Disponible en dos factores de forma convenientes para satisfacer sus necesidades: un sistema liviano que se transporta fácilmente en una caja con ruedas o un sistema móvil con carrito
- El panel de control mejorado permite que los proveedores de atención (y los controles) permanezcan al lado de los pacientes.
- Los flujos de trabajo más rápidos y la estimulación repetida mínima reducen el tiempo y la incomodidad de los procedimientos de prueba

HD EMG™



Un sistema mejorado. Fácil de usar.

- Panel de control incorporado con altavoces integrados; capacidades eléctricas, visuales y auditivas; elección de amplificador de 3 o 4 canales; conectores para dispositivos opcionales; y computadora portátil con software del sistema
- Interfaz fácil de usar con botones intuitivos del panel de control y teclas de función codificadas por colores, ya familiares para los usuarios antiguos de Natus EMG
- Botones estimuladores programables para controlar las funciones clave al alcance de su mano
- Pedal triple programable para funcionamiento con manos libres
- Configuración sencilla de tres cables para comenzar las pruebas antes
- Se conecta fácilmente a dispositivos periféricos

Mejore y avance sus opciones clínicas

Ultrasonido Neuromuscular

InVisus Pro, la solución de ultrasonido neuromuscular (NMUS) más nueva y avanzada de Natus, representa un primer paso emocionante hacia el futuro de NMUS en Natus. El uso de InVisus Pro simultáneamente con su UltraPro puede brindarle a su equipo una imagen más clara de las condiciones de los pacientes y brindar diagnósticos más confiables.



Potenciales evocados

En las pruebas de Potencial Evocado, la precisión y la eficiencia son primordiales. Nuestra tecnología de vanguardia: UltraPro S100 con Natus Elite 2® —establecer el estándar de calidad. Con un flujo de trabajo optimizado para pruebas rápidas, lo que garantiza que obtenga resultados precisos rápidamente, las opciones de EP en UltraPro se adaptan a una amplia gama de tipos de pruebas que necesita, todo dentro de nuestro software fácil de usar.

Resultados rápidos

- Realice comparaciones directas de resultados entre los lados izquierdo y derecho en una pantalla, acelerando el diagnóstico
- Benefíciase del marcado automático, con marcadores colocados automáticamente en los barridos
- Gestión de rechazo de artefactos rápida y adaptable



Potenciales evocados visuales (PEV)
con gafas y estimuladores de
patrones



Evocado somatosensorial
Potenciales (SSEP)
con NUEVO
SSEP activados por ECG

Precisión inigualable

- Eleve el control de calidad del paciente con FSP y RNE, garantizando respuestas más limpias con menos promedios
- Logre una calidad de datos superior gracias a nuestra frecuencia de muestreo de 48 kHz
- ¡NUEVO! SSEP activados por ECG, una característica única que elimina los artefactos del ECG de la grabación para obtener una respuesta más limpia en menos tiempo
- Adapte su vista de los barridos grabados a su gusto, con opciones como el modo par e impar, así como el modo de suma y diferencia, acomodándose a las diversas preferencias del usuario.



Evocado Auditivo
Potenciales con
FSP y RNE

Elite Natus

Construido con el software Natus Elite líder en la industria

Gestione eficientemente el recorrido del paciente, desde la admisión hasta el informe final

Impulsado por la tecnología Viking o Synergy líder en la industria, el software Natus Elite de UltraPro se desarrolló en estrecha colaboración con médicos y tecnólogos para ayudar a evaluar a sus pacientes con un mayor nivel de certeza y al mismo tiempo mantener los datos de los pacientes accesibles y seguros.



La resolución de datos EMG HD de más alta calidad

- La resolución de alta definición de 4800 puntos por trazo (para datos guardados en estudios de rutina de conducción nerviosa motora y sensorial) junto con un algoritmo de marcado superior produce señales de alta calidad.
- Medidas únicas de calidad de datos del EP para ahorrar tiempo y aumentar la confianza
- Colocación de marcadores automatizada superior

Flujos de trabajo simples y personalizables

- Funciones y patrones de flujo de trabajo totalmente personalizables
- Listas de trabajo personalizadas y específicas para médicos para ahorrar tiempo y brindar comodidad
- Flujos de trabajo de paciente a informe para una administración simple y eficiente
- Las operaciones frecuentes, como retroceder, avanzar, editar promedio y más, requieren clics mínimos y tiempo de prueba mínimo.
- Incluye valores de referencia AANEM, seleccionados automáticamente según la edad, altura, sexo e índice de masa corporal del paciente.

Integración y seguridad mejoradas de EMR

- Conexión rápida y segura a EMR de pacientes e integración HL7 con sistemas de información hospitalaria, redes y vista remota
- Mejoras en redes y bases de datos SQL para escalabilidad, seguridad, administradores y perfiles de usuario.
- Permite que las instalaciones utilicen credenciales de nombre de usuario y contraseña de red únicas
- Riesgo de seguridad reducido; deshabilitar inmediatamente el acceso al software Natus Elite cuando cambian las credenciales

El software Natus Elite es intuitivo, fácil de usar e increíblemente personalizable: usted decide cómo le gusta trabajar.

Médico del Centro Neuromuscular y Laboratorio de EMG
Hospitales Universitarios Centro Médico de Cleveland

Paciente a reportar en 7 pasos:




Capacidades de software con Elite y UltraPro


Multitud de opciones de pruebas para mejorar la atención al paciente y la investigación

Opciones de prueba confiables


NCS

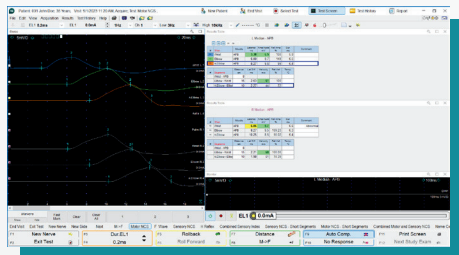

EMG con aguja

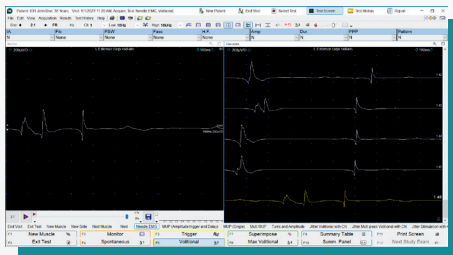


EMG de fibra única

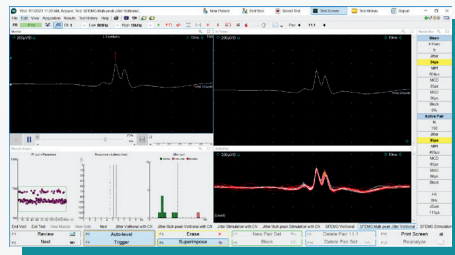


Opciones de prueba avanzadas


EMG cuantitativa

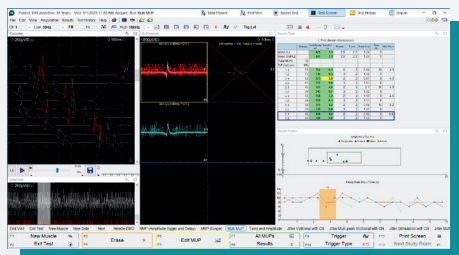

Multi-MUP

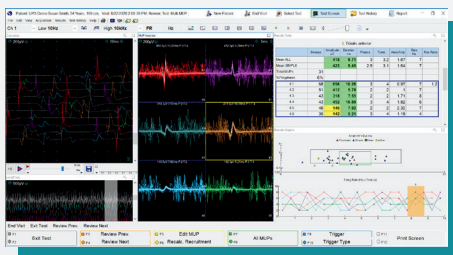

Potenciales evocados

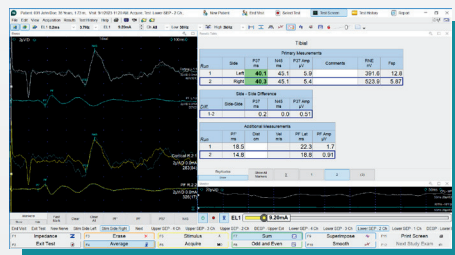

El software Natus Elite ofrece una variedad de capacidades de prueba personalizadas según las necesidades de su laboratorio.

Estudios de conducción nerviosa (NCS)

- NCS motor, NCS sensorial: monocal y multicanal
- Índice de latencia terminal (TLI), latencia residual (RL)
- Índice sensorial combinado (CSI)
- NCS motor y sensorial combinados
- Segmentos cortos (pulgadas)
- Onda F, reflejo H, reflejo de parpadeo
- Decremento (RNS), RNS de alta frecuencia
- Potenciales evocados magnéticos (MEP)**
- Respuesta cutánea simpática (SSR)
- Análisis RR: respiración normal, respiración profunda, de pie, Valsalva
- Pruebas de ejercicio largas y cortas
- Valores de referencia basados en edad, sexo, índice de masa corporal y altura, con valores recomendados por AANEM admitidos de forma predeterminada.

EMG con aguja

- EMG con aguja estándar: espontánea, volitiva, potencial de unidad motora (MUP), volitiva máxima, hallazgos de EMG (interpretación), EMG multicanal

EMG cuantitativa

- Patrón de interferencia cuantitativa del experto .
- Análisis de giros-amplitud (TA).
- Análisis multi-MUP (MMA).
- Índice de agrupamiento y análisis de factor de forma para EMG de superficie.

EMG de fibra única (SFEMG)/Macro EMG

- SFEMG voluntario
- SFEMG estimulado
- Densidad de fibra
- EMG macro

Potenciales evocados (PE)

- PE auditiva (PEA)
- Patrón visual EP (VEP) y gafas
- EP somatosensorial (SEP)
- Evaluación OHL
- P300/CNV

Otros módulos y funciones de software

- Estimulación automática
- Análisis de temblores**
- Ayuda de referencia

** No disponible en EE. UU.

Configurado para satisfacer sus necesidades clínicas

Disponible con amplificador de 3 o 4 canales

Configuración de portátil
disponible sin carrito

Panel de control con controles
codificados por colores fáciles de usar



Opción de impresora,
conexión de red a tu EMR

Opción de configuración de escritorio



Opción de amplificador
de 3 o 4 canales



Unidad base con integrado
panel de control e integrado
estimuladores eléctricos y
EP para una huella pequeña



configuración
laptop portátil
con bolsa de
ruedas
opcional



Sonda de estimulación

Configuraciones flexibles para su práctica:

- Computadora de escritorio o portátil Con o sin carrito
- Opciones de amplificador de 3 y 4 canales
- Paquetes EP
- Opción de bolsa con ruedas

Agregar valor a través de educación con Natus Neuro Training Academy

Aproveche al máximo su sistema UltraPro con los recursos disponibles en nuestra Neuro Training Academy gratuita. Ya sea que esté buscando optimizar el uso de las soluciones Natus, ampliar su conocimiento clínico o mejorar sus habilidades de diagnóstico, la academia Natus reúne la experiencia de líderes en el campo para ayudar a marcar una gran diferencia para pacientes y proveedores.

Únase hoy en neuro-training.academy



Soporte Natus

En Natus, nos esforzamos por lograr la excelencia en el servicio técnico y al cliente.

Así es como podemos ayudar:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica definitiva y equipos de instalación expertos.
- Disponibilidad de unidades de repuesto y repuestos
- Programas de cobertura de servicio y garantía extendida
- Cursos de formación para clientes completos y flexibles



Distribuidor autorizado en México

Dar sentido a las señales del cuerpo

©2023 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Todos los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas que pertenecen a Natus Medical Incorporated, sus subsidiarias o afiliadas, las promocionan o distribuyen bajo licencia. 019824 RevE

ventas@medikalmuneris.com
www.medikalmuneris.com

Suministros

Conveniente, completo, confiable

Natus admite todo el espectro de cuidados neurológicos y proporciona una cartera completa de suministros neurológicos para una solución perfecta.

- Atención al cliente dedicada y experta
- Procesamiento de pedidos optimizado
- Pedidos de suministros recurrentes para una entrega confiable y oportuna
- Cómodos pedidos en línea en mercados selectos con el [Tienda médica Natus](#)

Para obtener más información sobre los productos Natus, póngase en contacto con su distribuidor local o representante de ventas.



WhatsApp

Escanéame



Página web

Escanéame

natus®