

Natus Neuroworks antes NicoletOne vEEG System

El sistema Natus Neuroworks vEEG ofrece una excelente relación costo beneficio sin comprometer la calidad. Este sistema ofrece funciones esenciales para un rendimiento eficiente, por lo que es ideal para sus necesidades clínicas. El sistema NicoletOne vEEG ofrece todas las características de los sistemas de EEG sofisticados tales como la estimulación fónica, temporizadores para la hiperventilación, selección de montaje de datos, informes y mucho más. NicoletOne vEEG también puede incrementar sus capacidades de funcionamiento con una serie de paquetes de complemento opcional que incluye el vídeo digital, espiga y detección de episodios y el análisis del sueño.

Opciones de Crecimiento

Sincronización de Vídeo: Hasta 640 x 480 de resolución.

Detección de picos y espigas: Ya sea durante la adquisición del estudio o en la fase de revisión se cuenta con la opción de los parámetros configurables por el usuario. La sensibilidad de cada trazo se puede modificar durante la adquisición o posterior por medio de un control deslizante, mostrando rápidamente los cambios resultantes.

Análisis de Tendencias: Ya sea durante la adquisición del estudio o en la fase de revisión se cuenta con la opción de los parámetros configurables por el usuario se puede realizar el análisis de tendencias. Sobre, potencia total, el poder absoluto banda, banda de potencia relativa, EEG integrada amplitud, borde espectral y espectrograma. Número ilimitado de tendencias simultáneas. Cuenta con Configuración de los filtros individuales para cada tendencia.

Opción de Mapeo Topográficos cerebrales: Banda de energía, la coherencia y mapas de amplitud.

Control remoto: Proporciona toda la funcionalidad Control de una sesión de grabación remota. del programa de adquisición de un Sistema de Revisión conectado a través de red de área local (LAN).

Revisión remoto: revisar datos de manera remota a través de Internet mediante un servidor Citrix para tomar decisiones oportunas relacionadas con el cuidado de pacientes.


Análisis de estudio de sueño: Transformar el sistema en un sistema de polisomnografía completamente funcional.

NicVue Conectar HL7: Completamente compatible con el paquete para conectar equipos de diagnóstico para el sistema de


información hospitalaria (HIS).




Distribuidor Autorizado en: MÉXICO

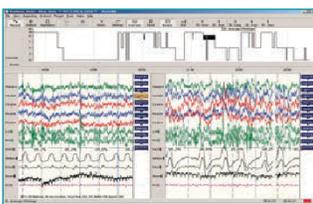


Pantalla de grabado

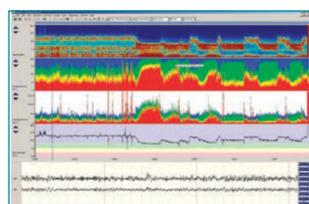

Pantalla de tendencia

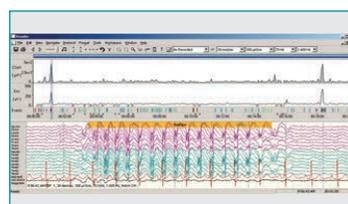

Tendencias / Incautación de pantalla

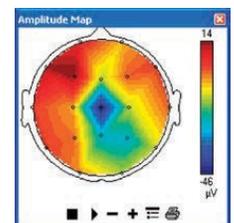

Pantalla de mapa de tendencias

Amplificadores y cabezales vEEG

100% Confiable, sin problemas de ruido e interferencia

Característica: Cabezal de interconexión de cables

Beneficio: Facilitar su uso en entornos oscuros.

Característica: Detector de impedancia integrado.

Beneficio: Facilita verificar el valor de la impedancia directamente desde el cabezal.

Característica: SpO2 integrado.

Beneficio: Adquisición continua de SpO2 durante el monitoreo de sueño.

Característica: Interface de conexión Ethernet Amplificador

Beneficio: Conexión estándar.

Característica: 9 conexiones extras (AC o DC)

Beneficio: Capacidad para conectar dispositivos tales como cinturones respiratorios, termistores, etc.

Característica: Botón Evento Paciente

Beneficio: El software del sistema crea entradas en la lista de eventos

Reportaje: Una entrada de alto nivel DC (sólo V32)

Beneficio: Habilidad para conectar varios dispositivos como CPAP

Reportaje: 12 Alto Nivel Entradas DC (V44 solamente)

Beneficio: Capacidad para conectar múltiples dispositivos como CPAP.



v44 Amplificador y cabezal



v32 Amplificador y Cabezal



Servicio

Natus Neurología se compromete a proporcionar un servicio ejemplar a nuestros clientes. Nuestro equipo de servicio al cliente dedicado y experimentado le ayudará con todos los aspectos de una orden. Para apoyar a nuestros productos, ofrecemos entrenados en fábrica

Los técnicos de campo y especialistas de aplicación clínica para el soporte en sitio. Además, ofrecemos un equipo de apoyo en el local técnico, que contará con expertos y una fuerte red de distribución en los mercados internacionales para ofrecer una amplia gama de opciones de servicio. Permitir que nuestros clientes más tiempo para atender a sus pacientes es nuestra meta. La lealtad del cliente es nuestra recompensa.

Consumibles

Natus Neurología ofrece una gama completa de accesorios y suministros neurodiagnóstico promueven la comodidad del paciente. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece un proceso de orden y envío aerodinámico para ahorrar tiempo y dinero.

Para obtener más información sobre los Programas de Servicio Neurología Natus o nuestra línea completa de suministros y accesorios, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.



Distribuidor Autorizado
en México



Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
Tel: 1-800-356-0007

ventas@medikalmuneris.com
www.medikalmuneris.com
Tel: 01-33-38348777



EMG, EEG, SUEÑO Y MÁS

SOLUCIONES BIOMEDICAS



www.medikalmuneris.com



"Estamos disponibles para brindar soluciones para tu clinica, consultorio o unidad médica."



Llámanos 33 3834 8777



EEG - EMG - PSG - SUEÑO



VENTA DE CONSUMIBLES DISPONIBLES



COMPRAR



www.medikalmuneris.com

Sucursal México

Marcos Carrillo No. 37, Col. Vista Alegre.
C.P. 06860, Alcaldía Cuauhtémoc.
Tel: (55) 5515 5746

Matriz Jalisco

Av. Hidalgo 2993
Col. Vallarta Norte C.P. 44690 Guadalajara
Tel: (33) 3834 8777

Sucursal Nuevo León

Loma Redonda 2204-B
Col. Loma Larga C.P. 64710 Monterrey
Tel: (81) 1931 7728